


BAUCHMUSKEL- TRAININGSGÜRTEL

QS700 Ultra

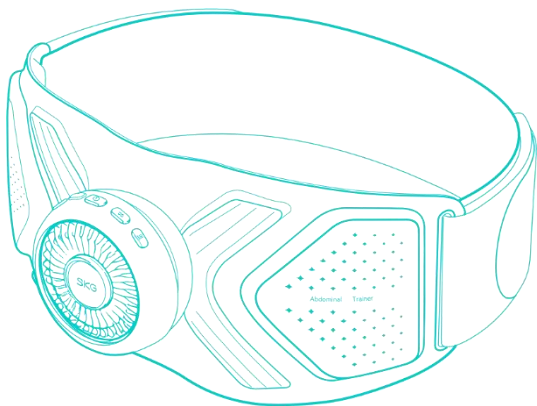

BENUTZERHANDBUCH

SKG

Vorderseite
des Gurts




Diese Seite zeigt nach innen und wird
direkt auf der Haut getragen. Passen Sie
die Enge entsprechend dem
Taillenumfang an


Rückseite
des Gurts



Diese Seite zeigt nach außen.
Vermeiden Sie direkten Hautkontakt

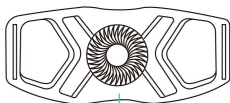

Tragen Sie diese Seite nach oben
gerichtet
(die Seite mit den Tasten)

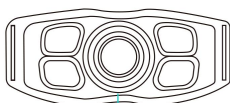

Diese Seite zeigt nach innen zur Haut.
Bitte stellen Sie sicher, dass sie eng an
Ihrer Bauchhaut anliegt



**Taste zur Einstellung der
Intensität der
Wärmekomresse**
Kurzdrukken: Stellen Sie die
Intensität der Wärmekomresse
ein;
Langdrukken: Stimme Ein-
/Ausschalten

Pulstaste „+“
Kurzdrukken: Pulsintensitätsstufe erhöhen

Pulstaste „-“
Kurzdrukken: Pulsintensitätsstufe verringern
Langdrukken: Schalten Sie die
Randbeleuchtung ein/aus


**Taste zur Einstellung der
Schwingungsintensität**
Kurzdrukken: Stellen Sie
die Schwingungsintensität
ein

Schalter-/Modus-Taste
Langdrukken: Strom Ein/Aus
Kurzdrukken: Modus wechseln

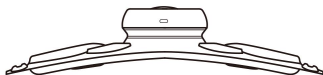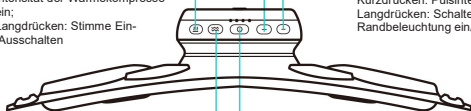


Ladeanschluss

(Das Drahtgitter dient nur zur Veranschaulichung. Das Aussehen des tatsächlichen Produkts kann abweichen)

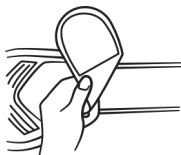


- 1 Befestigen Sie vor der Verwendung eine Seite des Gurtes.

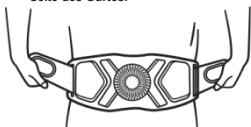

- 3 Sie können die Spannung beider Gurte nach Bedarf anpassen.



- 2 Befestigen Sie die andere Seite des Gurtes während des Anlegens.

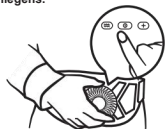

- 4 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät zu starten, und stellen Sie den gewünschten Modus und die gewünschte Stufe entsprechend den Anweisungen auf der Taste ein.

Anweisungen zum Laden/zur Stromversorgung

Nr.	Anzeiger	Statusbeschreibung
1	Das weiße Licht leuchtet ständig	Verbleibende Akkukapazität
2	Das rote Licht leuchtet ständig	Niedriger Akkustand
3	Blinkendes rotes Licht	Extrem niedrige Akkuspannung
4	Weißes LEDs leuchten in immer kürzeren Intervallen auf	Wird aufgeladen
5	Das weiße Licht leuchtet ständig	Vollständig aufgeladen

1. Intelligente Steuerung

(1) installieren Sie die App: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App „SKG Health“ herunterzuladen und zu installieren, und schließen Sie die Registrierung oder Anmeldung gemäß den Anweisungen ab.

(2) Verbinden Sie Bluetooth: Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones und öffnen Sie anschließend die App. Klicken Sie auf der Seite „Geräte“ auf „QS700 Ultra“, um das Gerät hinzuzufügen. Nach erfolgreicher Verbindung wird auf der APP-Seite „Verbunden“ angezeigt.

(3) Bequeme Steuerung: Passen Sie mithilfe der App Dauer, Modus, Intensität, Lautstärke usw. an.



2. Erweiterte Modi

Klicken Sie auf „Weitere Techniken“, um mehr und aktuellere Techniken außer den integrierten Techniken zu sehen und zu erleben. Wählen Sie „Meine Techniken“ aus, fügen Sie diese hinzu und legen Sie sie als individuellen Modus fest.

3. OTA-Aktualisierung

Aktualisieren Sie die Firmware-Version rechtzeitig und nutzen Sie die neuesten Funktionen, ohne das Gerät zu wechseln.

Produktspezifikationen

Produktbezeichnung	Bauchmuskel-Trainingsgürtel		
Modell	QS700 Ultra	Nennladespannung	5V 
Akkukapazität	2000mAh/14,8Wh	Nennleistungsaufnahme	13W

Um das Risiko von Störungen und möglichen Schäden zu verringern, verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:

Implantierte medizinische elektronische Geräte, wie z. B. Herzschrittmacher.

Lebenserhaltende medizinische elektronische Geräte, wie z. B. eine künstliche Herz-Lungen-Maschine.

Medizinische elektronische Überwachungsgeräte, wie z. B., Elektrokardiogramme.

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Hauptgerätetasten ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden oder nach längerer Lagerung, bei welcher der Akku entladen wurde, laden Sie das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung auf, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- Entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß den geltenden lokalen Umweltvorschriften, um eine Umweltverschmutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Fahrens, Kletterns oder bei anderen gefährlichen Aktivitäten, da dies zu Unfällen führen kann.
- Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern oder vollständig oder teilweise bewusstlosen Personen auf. Ermöglichen Sie ihnen nicht die Verwendung des Produkts, da dies zu Unfällen führen könnte.
- Dieses Produkt wird für Personen ab 16 Jahren empfohlen.
- Erhöhen Sie die Massageintensität schrittweise gemäß dem persönlichen Komfort; andernfalls kann die Unannehmlichkeit aufgrund einer höheren Intensität Muskelverspannungen verursachen.
- Dies ist ein Produkt zur persönlichen Körperpflege und darf nicht als Ersatz für Medikamente oder medizinische Geräte verwendet werden.
- Wenn Sie sich während der Anwendung unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung bitte sofort ein.
- Bei einer Taillenverletzung konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

In den folgenden Situationen konsultieren Sie bitte vor der Verwendung einen Arzt; andernfalls kann es zu Unfällen oder Beschwerden kommen:

- Patienten mit Infektionskrankheiten.
- Patienten, die allergisch auf Elektrodenpads aus rostfreiem Stahl reagieren.
- Patienten mit Herz- oder Hirnnervenerkrankungen.
- Patienten mit sensorischen Beeinträchtigungen oder Hautanomalien.
- Patienten, die ihren Willen nicht frei äußern können.
- Patienten mit Wahrnehmungsstörungen aufgrund von schweren peripheren Durchblutungsstörungen, z. B., bei Diabetes.
- Patienten mit empfindlicher Haut oder allergischer Dermatitis.
- Personen mit Durchblutungsstörungen wie z. B., zerebrovaskulären Erkrankungen, entzündeter oder geschwollener Haut an der Taille, Eiterbildung oder taillenbezogenen Beschwerden sollten dieses Produkt nicht verwenden, da es ihre Symptome verschlimmern könnte.
- Bei Schwangerschaft ist es ratsam, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren. Schwangere Frauen sollten dieses Produkt nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung eines Arztes verwenden.

Vorsichtsmassnahmen Bei Der Produktentsorgung

DE

Bitte entsorgen Sie wiederaufladbare Akkus (Lithium-Ionen-Akkus) umweltgerecht



Gefahr

Dieses Produkt ist mit einem speziellen wiederaufladbaren Akku ausgestattet, der nicht in anderen Produkten verwendet werden sollte. Laden Sie den Akku nicht auf, nachdem er aus dem Produkt entfernt wurde.

Werfen Sie den Akku nicht in ein Feuer und setzen Sie ihn nicht übermäßiger Hitze aus.

Durchbohren Sie den Akku nicht mit Nägeln, setzen Sie ihn keinen starken Stößen aus und zerlegen Sie ihn nicht.

Verbinden Sie die positiven und negativen Pole des Akkus nicht direkt mit Metall.

Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln, usw., auf. Laden, verwenden oder lagern Sie den Akku nicht an Orten mit hoher Temperatur, wie z. B., in der Nähe eines Ofens oder unter der direkten Sonneneinstrahlung.

Das Nichtbeachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Überhitzung, Brand oder Explosion führen.



Warnung

Bewahren Sie den entfernten wiederaufladbaren Akku außerhalb der Reichweite von Säuglingen auf, um ein versehentliches Verschlucken zu verhindern.

Bei Verschlucken suchen Sie bitte sofort ärztliche Hilfe auf.

Bei einem Auslaufen des Akkus berühren Sie die Flüssigkeit nicht mit den bloßen Händen. Beachten Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise:

Die Zerlegung ist nur erlaubt, wenn das Produkt entsorgt wird. Die Nichtbeachtung kann zu Bränden, Stromschlag, Verletzungen oder anderen Unfällen führen. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Reparaturen durchzuführen (außer bei Akkuwechsel).

Der in diesem Produkt verwendete Lithium-Ionen-Akku ist eine wertvolle, recycelbare Ressource.

Bitte entfernen Sie den Lithium-Ionen-Akku vor der Entsorgung und übergeben Sie ihn einer fachkundigen Stelle, die in der Lage ist, wiederaufladbare Akkus zu recyceln und zu verarbeiten.

1. Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor das Gerät entsorgt wird.
2. Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor der Akku entfernt wird.
3. Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Schritte zur Entnahme

1. Öffnen Sie das Gehäuse mit einem geeigneten Werkzeug.
2. Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Platine.
3. Trennen Sie den Akkuanschluss.
4. Akku entfernen.



Dieses Gerät wurde für typische am Körper getragene Vorgänge getestet. Um den Anforderungen zur RF-Belastung zu entsprechen, muss ein Mindestabstand von 0cm zwischen dem Körper des Benutzers und dem

Mobilteil, einschließlich der Antenne, eingehalten werden.

Gürtelclips, Holster und ähnliches Zubehör von Drittanbietern, die mit diesem Gerät verwendet werden, dürfen keine metallischen Bestandteile enthalten. Am Körper getragenes Zubehör, das diese Anforderungen nicht erfüllt, entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen an die RF-Belastung und sollte vermieden werden. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte oder eine zugelassene Antenne. Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU. Alle wesentlichen Funktestreihen wurden durchgeführt.

1. VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. Entsorgen Sie die alten Akkus gemäß den örtlichen Vorschriften.

2. Das Gerät entspricht den RF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 0 mm von Ihrem Körper verwendet wird. EU-Konformitätserklärung:

Die SKG Health Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist online verfügbar unter <https://www.skg.com/pages/skg-declaration-of-conformity>.



Elektroaltgeräte dürfen nicht mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an der kommunalen Sammelstelle durch Privatpersonen ist kostenfrei.

Der Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, diese einer geeigneten Sammel- oder Rücknahmestelle zuzuführen. Mit diesem geringen persönlichen Aufwand tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu recyceln und Giftstoffe zu behandeln.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



OST_EU_20230214000009

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain
succeservice2@hotmail.com



UK0017 17740760198SmlR

EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street, London,
Vereinigtes Königreich, EC2R 8AY
contact@evatost.com

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Adresse: 23A Etage, Gebäude 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin
South 1st Road, High-Tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan
District, Shenzhen, Guangdong, Volksrepublik China.

Website : <https://www.skg.com/>



**Hergestellt in
China**